

[Panel/Labs/Answers/47998](#) / برگشت

چاپ

دوره پنجاه و سوم زمستان 1404

H1 Results

شمارش رتیکولوسیت ها

کد نمونه 2490	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

شرح مختصر بیمار: لام (1)

بیمار آقای 19 ساله با هموگلوبینوری و ادرار تیره به پزشک مراجعه نموده است. پزشک درخواست تست CBC، OFT، Bill و LDH داده که نشان از همولیز داشته ولی آنمی ندارد و CBC دارای اندکسهای به قرار زیر بود، پزشک در ارزیابی علت آنمی بیمار درخواست تست رتیک و RPI نمود که گستره لام مذکور تهیه و در سامانه سیستم میکروسکوپ مجازی CaseViewerPro جهت بررسی و گزارش، قابل مشاهده میباشد:

WBC:13600/ul

RBC:4.48×10⁶/ul



HB: 15.2 g/dl

HCT:44.0 %

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Parameter	Correct	Lab.Result	DI	Total Labs	No Answers	Init. Count	Init. Mean	Init. SD	Weight. Count	Weight. Mean	Weight. SD	%CV	Seen	Not Seen
HBody	not seen												84	781
HeinzBody	not seen												201	705
Retic	12.0	11.00	0.23	1334	4	1330	11.75	5.23	1177	11.39	2.06	18.13		
RPI	11.8	10.24	0.27	1334	199	1135	10.81	7.37	974	10.67	2.06	19.35		

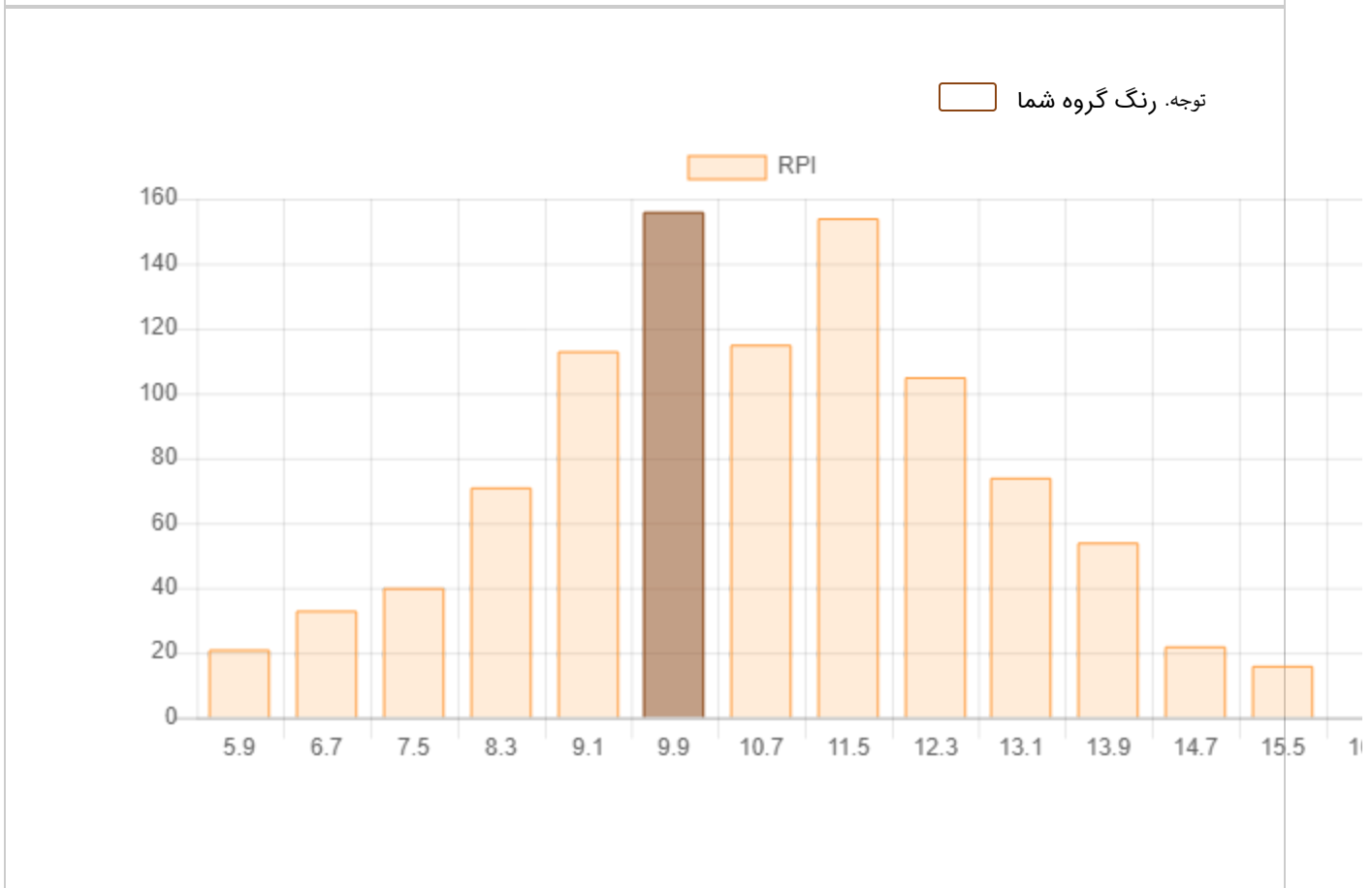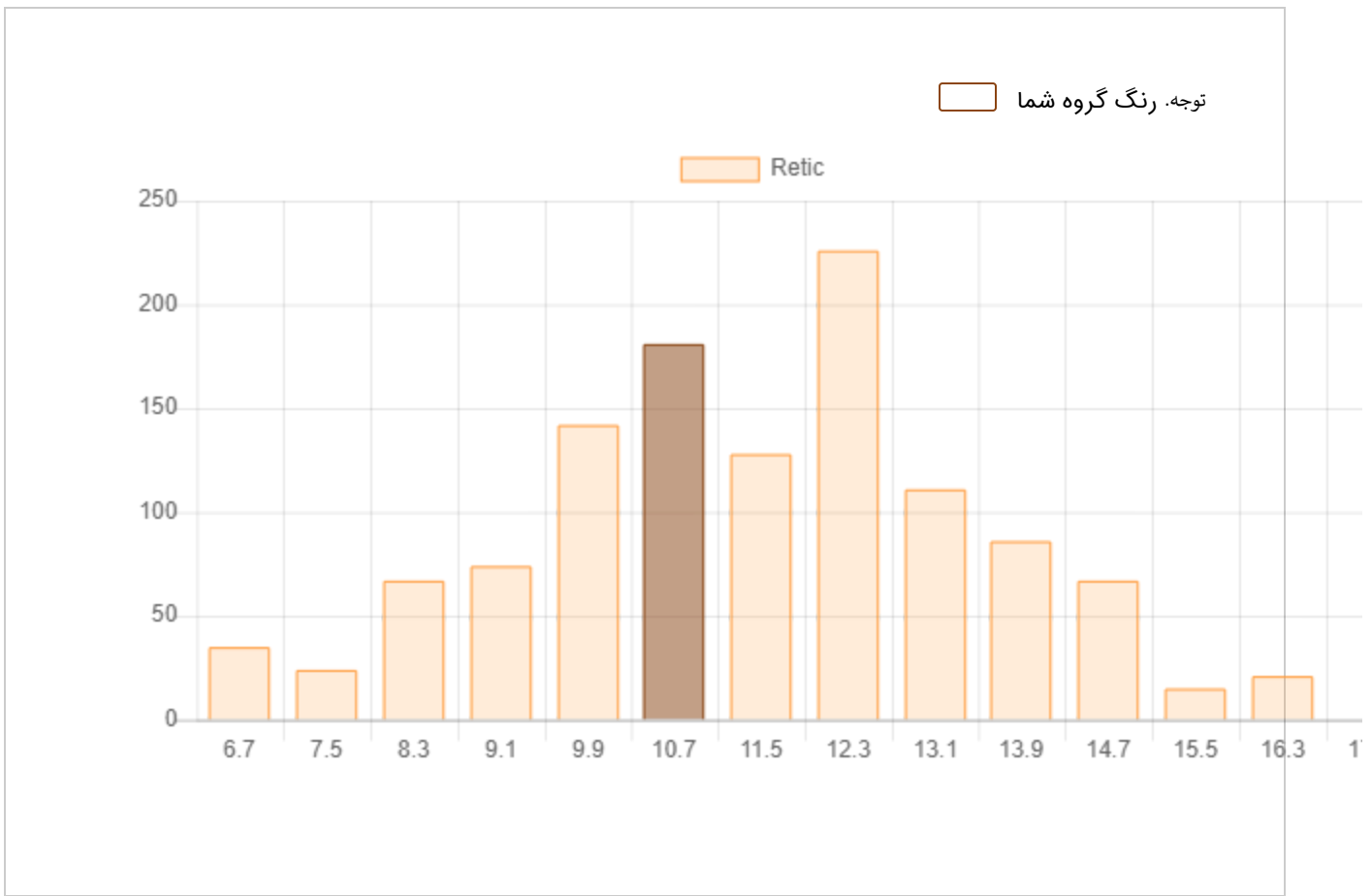

Copyright © 2026 IAQLD. All rights reserved.